



การปฏิเสธสิ่งตัวอย่าง

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก มีเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งตัวอย่าง เป็น 2 ระดับตามความวิกฤตต่อการทดสอบ และการประสานงานเพิ่มเติมอีก 1 ระดับ ดังนี้คือ

ระดับที่ 1 ปฏิเสธสิ่งตัวอย่างในรายที่วิกฤตต่อการทดสอบ


ได้แก่ ข้อมูลที่ ใบคำขอส่งตรวจและข้างภาชนะใส่สิ่งตัวอย่าง ไม่ตรงกัน สิ่งส่งตรวจไม่ได้คุณภาพตามที่ระบุในคู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สิ่งตัวอย่าง ที่เก็บไม่ตรงกับประเภทของการทดสอบ สิ่งตัวอย่าง ไม่เพียงพอต่อการทดสอบ โดยผู้รับสิ่งตัวอย่าง จะโทรศัพท์แจ้ง ขอให้ผู้ส่งจัดเก็บสิ่งตัวอย่าง มาใหม่ โดยไม่ส่งสิ่งตัวอย่าง นั้นคืน ยกเว้น ผู้ส่งยืนยันที่จะใช้สิ่งตัวอย่าง นั้น เพราะไม่สามารถเก็บใหม่ได้หรือเก็บยาก ซึ่งต้องดำเนินการดังนี้

1. ผู้รับบันทึกลงในแบบบันทึกการปฏิเสธสิ่งตัวอย่าง
2. ผู้รับจะส่งสิ่งส่งตรวจคืนพร้อมแบบบันทึกการปฏิเสธสิ่งตัวอย่าง
3. ผู้ส่งลงแบบบันทึกการยืนยันขอทำการตรวจวิเคราะห์

ระดับที่ 2 เกณฑ์บางข้อที่ไม่สมบูรณ์ แต่ไม่วิกฤตต่อการทดสอบ

1. ส่งสิ่งตัวอย่าง มาไม่ครบตามรายการขอตรวจ
2. ไม่ระบุข้อมูลการวินิจฉัยโรคหรืออาการทางคลินิก เวลาที่เก็บสิ่งตัวอย่าง (ซึ่งบางการทดสอบอาจ ไม่จำเป็น)

ผู้รับสิ่งส่งตรวจจะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ส่ง หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม บันทึกลงแบบบันทึก near miss และดำเนินการส่งต่องานตามรายการทดสอบ

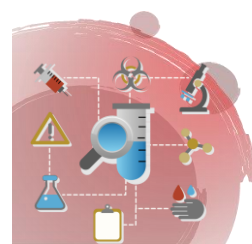



เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งตัวอย่างจากตึกผู้ป่วย และหน่วยงานภายในโรงพยาบาล

1. ชื่อและนามสกุลในใบนำส่งไม่ตรงกับสิ่งตัวอย่าง
2. สิ่งตัวอย่าง ปริมาณไม่เพียงพอ
3. HN ไม่ตรงกับชื่อผู้ป่วยในเวชระเบียน
4. สิ่งตัวอย่าง หกเลอะเทอะ
5. Barcode ไม่ชัดเจน/อ่านไม่ออก
6. เก็บสิ่งตัวอย่าง ผิดประเภท
7. ไม่มีสิ่งตัวอย่าง มีแต่ใบนำส่ง
8. สิ่งตัวอย่าง clot (Blood gas, CBC, PT, PTT)
9. สิ่งตัวอย่าง hemolysis (MB/ Electrolyte/LDH/SGOT/SGPT Etc.)
10. มีการยกเลิกรายการตรวจทางระบบ HIS
11. ไม่ระบุชื่อที่สิ่งตัวอย่าง
12. ระยะเวลาส่งหลังเจาะนานกว่า 4 ชั่วโมง / Electrolyte นานกว่า 1 ชั่วโมง/FBS ที่ใช้ Heparin tube ในการเจาะเก็บนานกว่า 1 ชั่วโมง
13. มีการปนเปื้อนของสารอื่นในสิ่งที่ต้องการตรวจ เช่น มีอุจจาระปนในปัสสาวะ มีปัสสาวะในน้ำอสุจิ เป็น
14. Influenza Ag A/B+RSV ไม่รับสิ่งตัวอย่าง ไม่ได้แช่ใน transport media บรรจุในภาชนะควบคุมความเย็น
15. กรณีส่งตรวจ CD4 ไม่รับตัวอย่างเลือดที่ผ่านการเก็บในตู้เย็นหรือแช่เย็นระหว่างนำส่ง และตัวอย่างเลือดที่เก็บไว้นานเกินกว่า 24 ชม

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจส่งตรวจตัวอย่างจากตัวอย่างจากหน่วยงานภายนอก (รพ.สต., รพ.ชุมชน, หน่วยบริการทางการแพทย์)

1. ต้องมีหนังสือนำส่งที่มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง / วันที่ / รายชื่อผู้ป่วย / รายการตรวจ / ลายเซ็นหัวหน้าหน่วยงาน
2. ต้องมีแบบฟอร์ม นำส่งสิ่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ที่มีรายละเอียดครบถ้วน
3. การปฏิเสธลักษณะตัวอย่างเหมือนกับการปฏิเสธตัวอย่างจากตึกผู้ป่วยและหน่วยงานในโรงพยาบาล

